


Die Kinnstütze wurde für die Testung und das Training von visuellen Funktionen entwickelt. Sie wird in vielen Einrichtungen, für das Training zuhause und in professionellen Fotostudios verwendet.

Ihre leichte Bauweise und die einfache Handhabung erleichtern die Anwendung, in denen eine stabile Kopfhaltung unerlässlich ist. Sie ist ergonomisch geprüft, flexibel und benutzerfreundlich.

Die Kinnstütze besteht aus einer leichten und sehr stabilen Edelstahl-Konstruktion, die per Schraubklemme am Tisch befestigt wird. Durch wenige Handgriffe können die Einstellungen individuell angepasst werden.

Die Höhenverstellbarkeit wird über eine Metallschienenkonstruktion und Feststellriegel geschaffen (Variation des Abstands der Kinnauflage über dem Tisch: 23 – 41 cm). Dadurch ist die Kinnstütze für Personen unterschiedlicher Körpergröße gut geeignet.

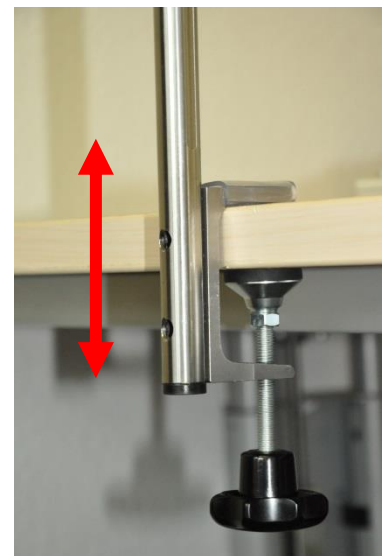

Die Kinnauflage besteht aus Kunststoff was im Vergleich zu Metall als angenehm empfunden wird. Durch die glatte Oberfläche gibt es keinen störenden Druck auf das Kinn und die Auflage ist leicht zu reinigen.

Zusätzliche Stabilität erhält der Kopf durch ein flexibel einstellbares Stirnband aus leicht abwaschbarem Polyesterstoff. Durch die variable Länge und die Höhenverstellbarkeit über verschiebbare Befestigungsstifte kann das Stirnband optimal an die Kopfform angepasst werden.

Die Kinnstütze wurde im Rahmen klinischer Studien erprobt. Durch die individuelle Anpassung wird die in Deutschland hergestellte Kinnstütze im Vergleich zu herkömmlichen Kinnstützen als sehr bequem empfunden.

Zusammenfassung der Merkmale:

- flexibler Einsatzbereich
- individuelle Einstellungen ermöglichen eine bequeme Sitzhaltung
- angenehm im Hautkontakt
- einfache Handhabung, stabile Halterung
- leicht zu reinigen



Der Preis für die Kinnstütze beträgt:

198,00 Euro

(zzgl. MwSt. + Versandkosten)

Die Kinnstütze sowie weitere Informationen erhalten Sie bei:

Schlüter & Schlüter UG (haftungsbeschränkt)

Lessingstraße 29

39108 Magdeburg

+49 (0)391 63 600 50

info@novavision.de

Bestellformular - Kinnstütze

per Email an info@novavision.de oder Fax an: +49 (391)

63 600 70

NovaVision Kinnstütze à 198,00 €: Stk.

zzgl. MwSt + Versandkosten

Lieferanschrift:

.....
.....
.....
.....

Ansprechpartner / Tel.:

Rechnungsanschrift:

(falls abweichend von Lieferanschrift).....

.....
.....

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift